


ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

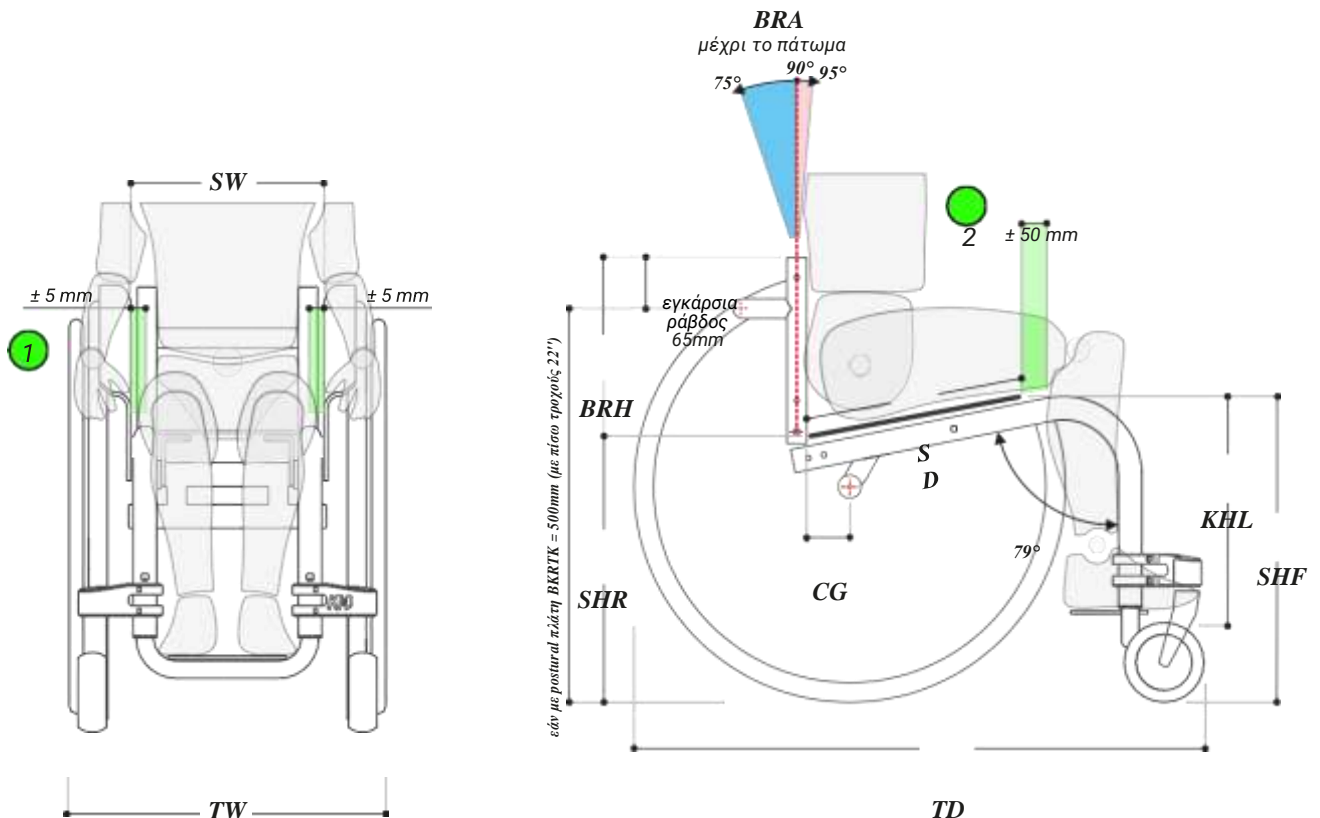

Στο τεχνικό σχέδιο δεν λαμβάνονται υπόψη οι διαστάσεις οποιονδήποτε μαξιλαριών στάσης και μαξιλαριών κατά της κατάκλισης.

SW : Λαμβάνεται υπόψη ανάμεσα στους εξωτερικούς σωλήνες του πλαισίου. Η διάσταση μεταξύ των εσωτερικών όψεων των πλαϊνών προστατευτικών είναι $+10\text{ mm}$ από την SW .

BRH : Λαμβάνεται υπόψη από το κάθισμα (ταπετσαρία ή άνθρακας) μέχρι την κορυφή του σωλήνα της πλάτης του καθίσματος.

SD : Λαμβάνεται υπόψη το βάθος της πλάκας του καθίσματος.

CG : Λαμβάνεται υπόψη από τον αφρό της πλάτης μέχρι τον άξονα των πίσω τροχών.

SHF και SHR : Το ύψος του καθίσματος μπροστά και πίσω μπορεί να ρυθμιστεί μόνο με κλίση του καθίσματος. Το ύψος των σωλήνων πλαισίου από το δάπεδο είναι σταθερό.

Για τη σωστή μέτρηση μεγέθους του αναπηρικού αμαξιδίου συνιστάται:

- 1 SW | Πλάτος Καθίσματος Το διάστημα $\pm 5\text{ mm}$ μεταξύ της λεκάνης του χρήστη και των πλαϊνών προστατευτικών
- 2 SD | Βάθος Καθίσματος: Το διάστημα $\pm 50\text{ mm}$ μεταξύ της ιγνύας(πίσω μέρος γόνατου) του χρήστη και του άκαμπτου καθίσματος Carbon



SW : 240 – 320 mm
με
προσαρμογές
των 20 mm



SD : 280 – 360 mm
με
προσαρμογές
των 20 mm



BRH : 240 – 375 mm
με
προσαρμογές
των 15 mm



SHR : 320 – 390 mm
με
προσαρμογές
των 10 mm



SHF : 380 – 450 mm
με
προσαρμογές
των 10 mm



KHL : 90 – 360 mm
με
προσαρμογές
των 10 mm



CG : 50 – 90 mm
με
προσαρμογές
των 20 mm



BRA : $85^\circ - 95^\circ$
με
προσαρμογές
του 1°



CRW :
 0° ή 3°



ΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (TW)
(γωνία Camber 0°)
 $SW + 175\text{ mm}$
(Γωνία Camber 3°) $SW + 220\text{ mm}$



ΟΛΙΚΟ ΒΑΘΟΣ(TD)
 $SD280, 300$ και $320 = 730 + 50 - CG$
 $SD340$ και $360 = 770 + 50 - CG$



ΒΑΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:
(Χωρίς πίσω τροχούς)
 $\pm 4.5\text{ kg}^*$



ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ:
75Kg



*** ΣΥΝΘΕΣΗ:**
 $SW240 / SD280 / KHL280 / BRH240 / BRKASL / FRKDS2 / FRWHP4 / SDK / BKRTT$

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Τύπος πλαισίου:	Σταθερό πλαίσιο (FRMDR)
Πλάτος καθίσματος (SW):	από 240 έως 320 mm
Βάθος καθίσματος (SD):	από 280 έως 360 mm
Γωνία Camber Πίσω Τροχών (CRW):	0° ή 3°
Κέντρο Βάρους (CG):	από 50 έως 90 mm
Ύψος καθίσματος πίσω πλευράς (SHR):	από 320 έως 390mm
Ύψος καθίσματος μπροστά (SHF):	από 380 έως 450 mm
Υποπόδιο:	Υποπόδιο με πλάκα ρυθμιζόμενης γωνίας
Μήκος γόνατο-φτέρνα (KHL):	από 90 έως 360 mm
Ύψος πλάτης (BRH):	από 240 έως 375 mm
Γωνία πλάτης (BRA):	Γωνία από 85° έως 95°
Φρένα:	Aria® Ψαλίδι (BRKASL + BRKASR)
Χρώμα πλαισίου:	Πράσινο (VR) Κίτρινο (GO) Ροζ (PU) Ανοιχτό μπλε (LB) Πορτοκαλί (OR)
Τύπος πίσω τροχών:	22 " Μαύρος τροχός με μαύρη πλήμνη και μαύρες ακτίνες
Στεφάνες 22":	Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο (HDRMB.2)
Λάστιχο 22x1.00:	Ασημί ανοδιωμένο αλουμίνιο (HDRMS.2)
Πιρούνια ρόδας:	Schwalbe Right Run - Μαύρο/Γκρι
Μπροστινοί τροχοί:	Aria® Διπλής Όψης - μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο (FRKDS2)
Πλαϊνά προστατευτικά / Υποβραχιόνια:	3" Μαύρα πλαστικά (FRWHP3), 4" (FRWHP4)
Πλάτη:	Μαύρα ABS με φτερό (SDK)
Ιμάντας γάμπας:	Aria® ρυθμιζόμενη με ιμάντες τάνυσης (BKRTT)
	Ιμάντας γάμπας, ύψος 8 cm – μαύρο ύφασμα (CLFB8)