




Η SANO βάζει **πρώτα**  
τους **ανθρώπους!**

# LIFTKAR PTR

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΒΑΔΙΣΗ

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ. ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ.

Το σύστημα ανάβασης σκάλας με ερπύστρια LIFTKAR PTR είναι μια μονάδα που έχει δημιουργηθεί για μεταφορά σε ίσια σκάλα. Η χρήση του αυξάνει την ελευθερία κινήσεων για άτομα με δυσκολίες στη βάδιση. Ταυτόχρονα είναι εργονομικά σχεδιασμένο για να ανακουφίζει την πίεση στην πλάτη του ατόμου που χειρίζεται τον μηχανισμό ανάβασης σκαλιών.

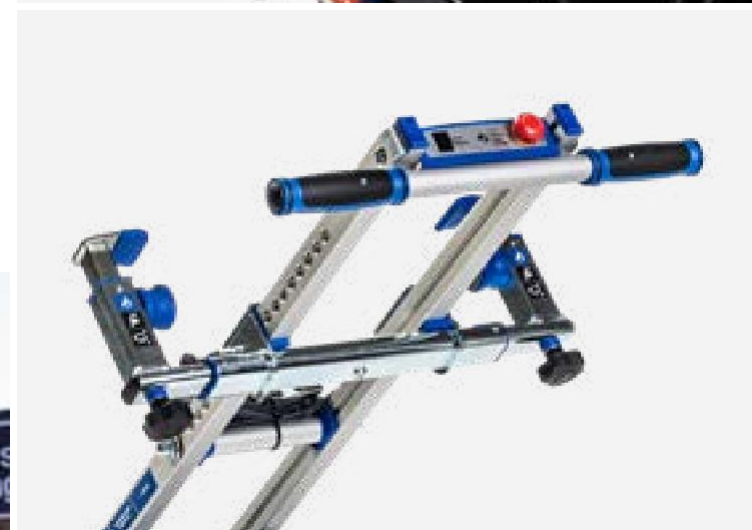



ΜΟΝΑΔΑ  
ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΥΜΠΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΤΗΣ

ΖΩΝΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ  
ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΗΣ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΒΑΣΗΣ



Βασικός εξοπλισμός

# LIFTKAR PTR

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Το εξαιρετικά ελαφρύ σύστημα ανάβασης σκαλιών LIFTKAR PTR είναι εντυπωσιακά εύκολο στην χρήση, διαθέτει 3 ταχύτητες, ηχητική και οπτική προειδοποίηση κλίσης καθώς και εύρος έως 1000 βήματα με μία απλή φόρτιση της μπαταρίας. Είναι τόσο εύκολο - απλά απελευθερώστε 2 μοχλούς για να χωρίσετε το LIFTKAR PTR εύκολα σε 2 φορητά μέρη . Το LIFTKAR PTR εξασφαλίζει ασφαλή χειρισμό στις σκάλες. Υπάρχουν 2 διαθέσιμες εκδόσεις του LIFTKAR PTR για 2 διαφορετικά μέγιστα φορτία:

## PTR 130/160



PTR ( με προσκέφαλο και μικρή ράμπα (διαθέσιμη ως αξεσουάρ)

### ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

Το LIFTKAR PTR είναι η βασική έκδοση που επιτρέπει την μεταφορά των χειροκίνητων αμαξιδίων επάνω και κάτω στις σκάλες άνετα και με ασφάλεια. Διατίθεται για τα παρακάτω μέγιστα φορτία (αμαξίδιο και επιβάτης):

LIFTKAR PTR 130 (Art. no. 075 701): για μέγιστο φορτίο έως 130 kg

LIFTKAR PTR 160 (Art. no. 075 702): για μέγιστο φορτίο έως 160 kg

## PTR-L 130/160



PTR-L ( με προσκέφαλο και ράμπα οδήγησης (διαθέσιμο ως επιλογή )


### ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

Το LIFTKAR PTR-L είναι η μεγαλύτερη έκδοση (+132 mm) του LIFTKAR PTR, όπου διατίθεται προαιρετικά με εργοστασιακά τοποθετημένες ράμπες (Art. no. 975 110) για την μεταφορά ελαφρού είδους ηλεκτρικών αμαξιδίων. Διατίθεται για τα παρακάτω μέγιστα φορτία (αμαξίδιο και επιβάτης):

LIFTKAR PTR-L 130 (Art. no. 075 705): για μέγιστο φορτίο έως 130 kg

LIFTKAR PTR-L 160 (Art. no. 075 703): για μέγιστο φορτίο έως 160 kg

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

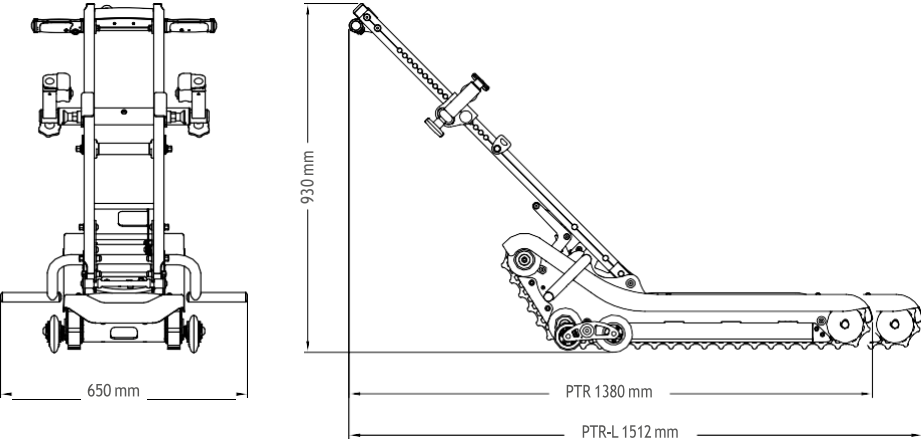

	LIFTKAR PTR	LIFTKAR PTR-L
Ικανότητα φορτίου και αριθμός προϊόντος για το πλήρες LIFTKAR PTR συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας και του φορτιστή.	PTR 130: 130 kg* Art. no. 075 701	PTR-L 130: 130 kg* Art. no. 075 705
	PTR 160: 160 kg* Art. no. 075 702	PTR-L 160: 160 kg* Art. no. 075 703
	* Μέγιστο φορτίο (Αμαξίδιο & επιβάτης)	* Μέγιστο φορτίο (Αμαξίδιο & επιβάτης)
Συνολικό βάρος	38.2 kg	39.4 kg
Βάρος μονάδας χειρισμού	9.6 kg	
Βάρος μονάδας βάσης	28.6 kg	29.8 kg
3 ρυθμίσεις ταχύτητας (ανά λεπτό)	5.5 m / 6.5 m / 7.5 m	
Μέγιστη κλίση	35°	
Ύψος	930 mm	
Πλάτος	650 mm	
Συνολικό μήκος της μονάδας της βάσης	980 mm	1112 mm
Συνολικό μήκος συμπεριλαμβανομένης της μονάδας λαβής	1380 mm	1512 mm
Διαστάσεις αποβίβασης (min.)	970 mm x 970 mm	1150 mm x 1150 mm

## 10 ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΣΕ ΠΕΙΣΟΥΝ

- 01 ηλεκτρονική προστασία από υπερφόρτωση
- 02 ηλεκτρονικός αισθητήρας κλίσης που περιλαμβάνει οθόνη ταχύτητας
- 03 ηχητική και οπτική προειδοποίηση κλίσης
- 04 λειτουργικό σύστημα ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή
- 05 ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης
- 06 LED οδηγίες στην οθόνη κατεύθυνσης
- 07 εύρος έως 1000 βήματα με μια απλή φόρτιση της μπαταρίας
- 08 διακόπτης κλειδώματος
- 09 κουμπί έκτακτης ανάγκης
- 10 ενσωματωμένος μετρητής ωρών λειτουργίας



# ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ

Τα αξεσουάρ για το σύστημα ανάβασης σκάλας LIFTKAR PTR είναι ειδικά σχεδιασμένα για να καλύψουν τις ανάγκες και απαιτήσεις των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην βάδιση. Η ποιότητα της τεχνικής λύσης και του σχεδιασμού είναι υψίστης σημασίας.

## LIFTKAR PTR ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ \*



**Σύστημα κλίσης**  
Art. no. 975 115



**Ράμπες οδήγησης**  
ιδανικό για LIFTKAR  
PTR-L Art. no. 975 110



**Πτυσσόμενος βραχίονας συγκράτησης αμαξιδίου**  
Αντί του τυπικού βραχίονα  
Art. no. 975 100



**Γκρι μέρη, τοποθετημένα**  
για LIFTKAR PTR, Art. no. 075 087  
για LIFTKAR PTR-L, Art. no. 076043



**Σφιγκτήρας πλάτης - ρυθμιζόμενο**  
Standard (εύρος σύσφιξης: 360 mm - 500 mm)  
Art. no. 975 146

Πλατύ (εύρος σύσφιξης: 460 mm - 600 mm) Art. no. 975 149

**Σφιγκτήρας πλάτης**  
Πλατύ (εύρος σύσφιξης: 440 mm - 600 mm) Art. no. 975 129

\* Παρακαλώ επιλέξτε με την παραγγελία του LIFTKAR PTR & LIFTKAR PTR-L .

# LIFTKAR PTR ΑΙΞΣΟΥΑΡ



**Επέκταση**  
Βραχίονας συγκράτησης αμαξιδίου  
+100 mm  
Art. no. 975 105



**Προσκέφαλο**  
Art. no. 075 104



**Προσκέφαλο**  
**ρυθμιζόμενο**  
Art. no. 975 141



**Μαξιλάρι πλάτης**  
Art. no. 975 104



**Πρόσθετες ράμπες**  
ειδικά για μεταφορά  
αμαξιδίων  
Art. no. 975 103



**Μικρές ράμπες**  
πλάτος τροχιάς έως  
710mm Art. no. 975 143  
  
πλάτος τροχιάς έως  
740 mm Art. no. 975 165



**Σύστημα ζώνης**  
για κίνηση σε  
ράμπα  
  
Art. no. 975 140





**ORTHOSTATICAL**

*Live with autonomy!*

Θεσσαλονίκη Τ. 2310 214127, Αθήνα Τ.210 8256748  
[www.orthostatical.gr](http://www.orthostatical.gr) [info@orthostatical.gr](mailto:info@orthostatical.gr)

**LIFTKAR<sup>®</sup> PTR**  
powered tracked stairclimber

**SANO**   
makes life easier.